



1.1.1 Conexão de vapor para filtros de gás de pressurização

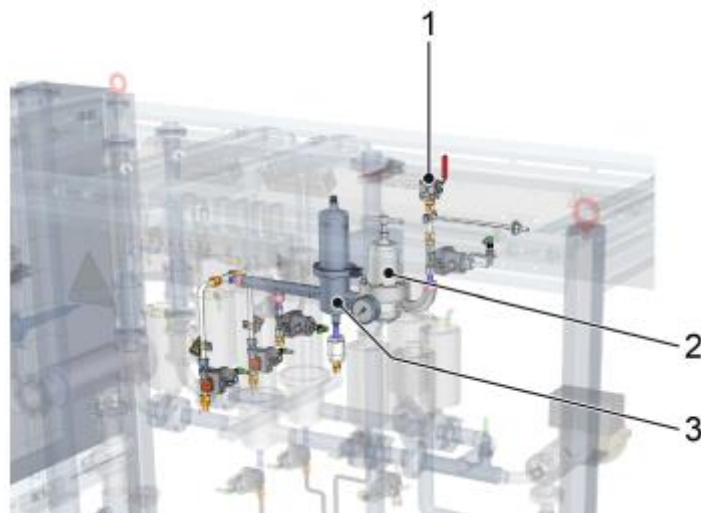


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-1: Conexão de vapor no manifold de válvulas

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Conexão de vapor	2	Redutor de pressão
3	Cartucho de filtro		

A conexão de vapor para esterilização de filtros de gás pressurizado está localizada no manifold de válvulas.

A pressão pode ser regulada manualmente usando o redutor de pressão. O cartucho de filtro limpa o vapor antes deste ser levado aos filtros de gás pressurizado.

Para as definições de vapor, veja a informação no capítulo “*Dados técnicos*”.